



### ÖKAD KLINISK FUNKTIONALITET

Olika brukare har olika behov av sittanpassningar – för att möta de olika individuella behoven har vi utvecklat *Invacare Flex3*-systemet, som är ett stödjande och flexibelt sits- och ryggsystem.

*Flex3*-systemet erbjuder kombinationer av ryggstödsbaser och ryggdynor som ger allt ifrån litet stöd till en hög nivå av ergonomiskt stöd. *Flex3*-systemet är anpassat för brukare med olika behov av stöd. Här finns allt från ett enklare stöd till en hög nivå av flexibilitet och komfort.

### KOMPATIBILITET MELLAN PRODUKTERNA

Med samma infästning på de olika rullstolarna, kan *Flex3*-systemet erbjuda möjligheter att kombinera ryggbaser och ryggdynor tvärs över hela sortimentet av komfortrullstolar. Dessutom är det bakåtkompatibelt och underlättar vid rekonditionering.



#### Dual Stability System

I kombination med sitsvinkling, hjälper **DSS** till att minska eller undvika friktion och skjuvning, vilket förebygger trycksår.

*Rea*® är den enda leverantören som erbjuder **DSS**, vilket är patenterat. *Rea*® var en av de första stolarna som utvecklades med kroppslängdskompensering (höga ledpunkter) på ryggstöd och benstöd.

**Viktförskjutning av tilt.** Bibehåller stolens stabilitet när brukarens vikt flyttas framåt. Dessutom höjs sitsens framkant enbart 40-60 mm.

**Kroppslängdskompensering.** Sitsen och benstöden anpassas perfekt till brukarens kroppslängd när man vinklar både ryggstöd och benstöd.

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga - Sverige  
Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

© 2012 Invacare International Sàrl.  
Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Flex3 - SE- 03/2012


# Ökad klinisk funktionalitet Invacare Rea **Flex3**





**En modell som passar dig och din livsstill**

Rekommendation av ryggstödsbas, fast eller ställbar

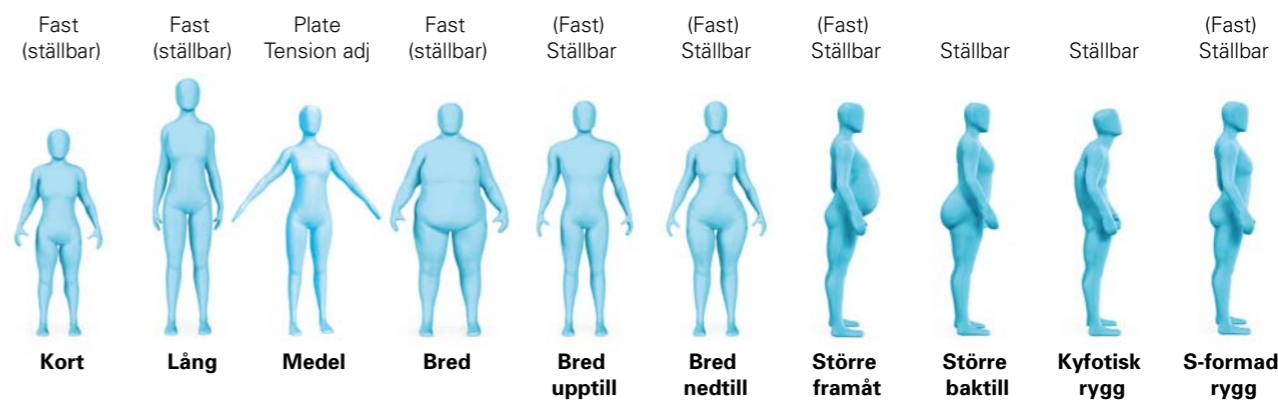

**Hitta rätt rullstol**

→ **Rea® Azalea®**  
 → **Rea® Azalea® Assist**  
 Passar alla brukare, finns brukar- eller vårdarmanövrerad.



→ **Rea® Azalea® Tall**  
 optimal komfort för långa brukare



**Rea® Azalea® Max**  
 för tunga brukare



**Rea® Azalea® Base**  
 för de brukare som behöver individuell sittanpassning



**Rea® Azalea® Minor**  
 till små vuxna och tonåringar

→ Passar Flex3-systemet bäst

**Välj rätt ryggstödsbas**



**Ställbar ryggbas**  
 till de brukare som behöver individuella inställningar för sitt sittande



**Fast ryggbas**  
 för dem som behöver ett fast och/eller stabilt stöd

**Hitta rätt ryggdyna**



**Laguna**  
 Ger lateralt stöd



**Mistral**  
 Ger ett specifikt stöd kring midjan. Smalare upptill för att ge utrymme åt skuldror vid körning



**Passad 2**  
 Ger stöd åt skuldrorna/axlarna och ett stöd kring bäckenet.



**Överdrag polstrat**  
 Tillsammans med den ställbara ryggbasen kan man forma ryggen så att den passar den enskilda brukaren.



**Passad 2 Hög**  
 För långa brukare som behöver stöd åt skuldrorna/axlarna och ett stöd kring bäckenet.

Alla ryggdynor finns i svart plysch eller svart Dartex.

Kombinera	Fast ryggbas	Ställbar ryggbas
Laguna	X	X
Passad 2	X	X
Shoulder high	X	X
Mistral 2	X	X
Lateral cover	ej	X

