

**AQUATEC®**

# Orca

## Badkarslyft



Den ultimata badupplevelsen



Yes, you can.

Aquatec **Orca** badkarslyft är ett säkert sätt att både komma ner i badkaret för ett skönt bad, och sedan lika säkert komma ur. Med en knapptryckning kan du höja eller sänka lyften i eller ur badläge.

Aquatec **Orca** är dessutom väldigt enkel att lyfta i eller ur badkaret. För att passa olika badbehov finns Aquatec **Orca** i två olika versioner.

Batteri och manöverdosa är integrerade i den vattentäta handkontrollen och det uppladdningsbara litium batteriet ger skydd mot urladdning och har minneseffekt.

- Ergonomisk flytande handkontroll med uppladdningsbara batterier
- Högt ryggstöd som kan ställas in och fällas ihop med en hand
- Enkel att ta ur och montera i badkaret via sugproppar
- Ett stort utbud av olika tillbehör för att passa olika behov

### Bekvämt, säker och mycket effektiv

Aquatec **Orca**-sortimentet är utformat med användaren i åtanke, vilket ger en bekväm och enkel bad upplevelse. Nyckelfunktioner inkluderar:

- Lutande ryggstöd
- Integrerat huvudstöd
- Ergonomisk flytande handkontroll med uppladdningsbara batterier
- Automatisk upplåsning för snabb borttagning från badkaret
- Ryggstödet kan lutas upp till 40°

Den förstärkta saxmekanismen på **Orca**-sortimentet kombinerar säkra lyft med en kompakt konstruktion samtidigt som minimum sitthöjd på bara 60 mm ger gott om utrymme för en djupare och mer bekvämt bad.



### Aquatec **Orca XL**

Ett kraftpaket för tunga brukare, lyften klarar upp till 170 kg.



## Egenskaper och Tillbehör



Kan även användas utan överdrag.



Kan enkelt delas i två delar.



Enkel att rengöra.



### Ryggstöd vinkelställbart

Med individuella justerbara sidovingar på ryggen.

**1471623** Vit  
**1471630** Blå



### Huvudstöd höjdställbart

**15461** Vit  
**15462** Blå



### Enkel förflyttning

Sidovingarna på **Orca** sitter nära ihop med sittdelen. Det gör att man inte klämmer sig mot badkaret när man sänker eller höjer lyften. Dessutom är sidovingen till stor hjälp när man ska förflytta sig från t ex en rullstol över till badkaret.

**1471636** Sidovingar (par) med vitt överdrag (**Orca**)  
**1471606** Sidovingar (par) utan överdrag (**Orca**)



### Bröst- och höftbälte

Har ett mycket behagligt material som består av flera lager tyg.

**1528702** för **Orca**




### Bendelare

Hjälper till att stabilisera användaren.  
**1525932** 7 cm blå  
**1525933** 12 cm blå



### Höjdadapter

Höjer sitthöjden med 2,4 eller 6 cm. För batteridrivna badkarslyft.  
**15170** Höjdadapter 2 cm x 4 st med ombyggnadskit  
**1469** Höjdadapter 2 cm x 4 st utan ombyggnadskit

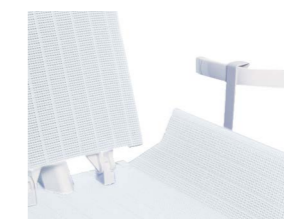

### Glidhjälp



För ojämnheter på badkarskanten.  
**15309** Grå, glidhjälp för batteridrivna badkarslyftar.



## Teknisk data

För mer omfattande förköpsinformation om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, se på din lokala Invacare-webbplats.

Artikelnummer	Aquatec Orca	Aquatec Orca XL
Badkarslyft med vitt överdrag	1573864	1573685
Badkarslyft med blått överdrag	1573875	
Mått		
Sittbredd utan sidovingar	375 mm	375 mm
Sittbredd med sidovingar	715 mm (A)	715 mm (A)
Sittdjup	490 mm (B)	490 mm (B)
Sitthöjd max	420 mm (C)	420 mm (C)
Sitthöjd min	60 mm	60 mm
Ryggstödsbredd	360 mm (D)	360 mm (D)
Ryggstödhöjd	665 mm (E)	665 mm (E)
Totaldjup (uppfällt ryggstöd)	650 mm (F)	650 mm (F)
Totaldjup (ryggstöd nedfällt)	920 mm	920 mm
Totalhöjd med ryggstöd	1075 mm (G)	1075 mm (G)
Bas	580 x 285 mm	580 x 285 mm
Överdragets tjocklek	3 mm	3 mm
Övrig info		
Totalvikt utan handkontroll	12.1 kg	12.1 kg
Vikt, sits	7.5 kg	7.5 kg
Vikt, ryggstöd	4.6 kg	4.6 kg
Vikt, handkontroll	0.4 kg	0.4 kg
Max brukarvikt	140 kg	170 kg
Ryggstöd kan fällas upp till	40°	40°
Färg	Vit	Vit

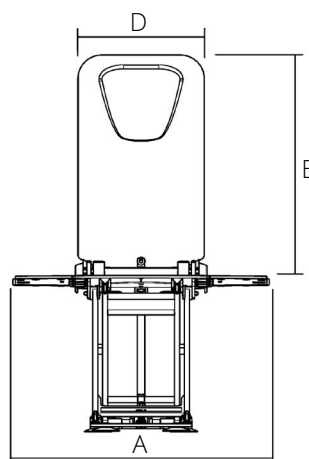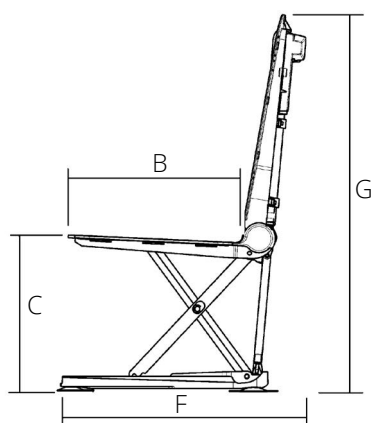

**Kundservice: 08-761 70 90**  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga  
Sweden

